
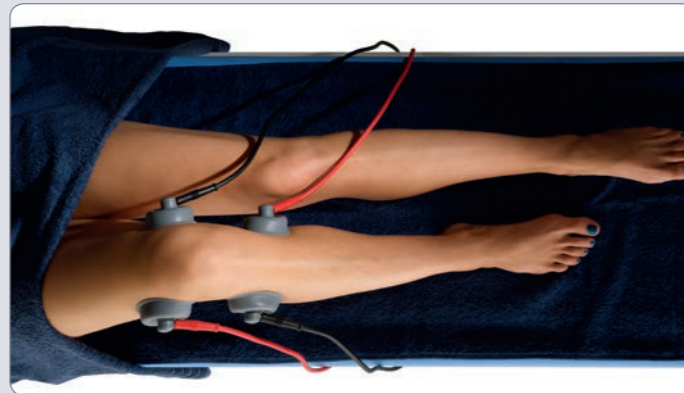


Avaco

Podtlaková terapie

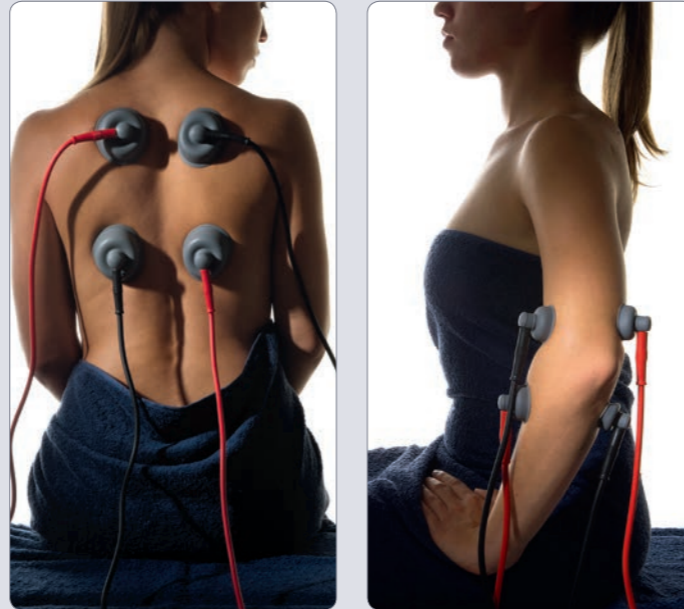

Avaco je přístroj pro podtlakovou terapii, který dokonale doplňuje přístroje pro elektroterapii. Slouží k aplikaci proudů prostřednictvím vakuových elektrod.

Díky vakuovému připevnění elektrod je provádění procedury výrazně snazší, zejména v případě ošetřovaných ploch, na kterých nelze použít ploché elektrody.

Navíc v pulzačním režimu vzniká účinek mechanické masáže zvyšující prokrvení a metabolismus.

Unikátní vlastností je synchronizace režimu práce s generovaným proudem. Podtlak se zvyšuje ve fázi stimulace a snižuje ve fázi odpočinku. Režim je určen pro použití s tréninkovými programy.

Samotěsnící vakuové elektrody výrazně zvyšují komfort použití, obzvláště v případě práce v jednom obvodu.

Různé rozměry přísavek umožňují optimalizaci terapie – závisle na druhu proudu a ošetřované ploše.

- dva nezávisle zapínané obvody (snadná práce v jednoobvodovém režimu)
- režim práce:
 - kontinuální
 - pulzační
 - střídavý pulzační
 - synchronizovaný s proudem (pro tréninkové programy)
 - režim se zvýšeným dolním tlakem
- 2 rozměry vakuových jednotek: 60 mm (standardní) a 90 mm volitelně
- samotěsnící vakuové elektrody
- spolupráce s elektrostimulátory Astar



Funkční vlastnosti

| Funkční vlastnosti | Avaco |
|---------------------------------|-------|
| samotěsnící vakuové elektrody | ● |
| dva obvody | ● |
| možnost regulace podtlaku | ● |
| signalizace plné nádrže na vodu | ● |

Režim práce

| | |
|--|---|
| kontinuální | ● |
| pulzační | ● |
| střídavý pulzační | ● |
| synchronizovaný s proudem | ● |
| pulzační se zvětšeným dolním podtlakem | ● |

Technické parametry

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| frekvence podtlakové vlny | 6, 12, 20, 40, 60 imp/min |
| max. podtlak | 500 mbar |
| počet vakuových elektrod: | 4 |
| příkon | 230V/20W |
| rozměry ŠxHxV | 30x26x12 cm |
| hmotnost | max 3,5 kg |

Standardní vybavení

| | |
|---|---|
| síťový kabel | ● |
| kabely pro propojení s elektrostimulátory | 2 |
| podtlakový kabel (černý) | 1 |
| podtlakový kabel (červený) | 1 |
| podtlakový kabel (bílý) | 1 |
| podtlakový kabel (modrý) | 1 |
| vakuové elektrody ø 60 mm | 4 |
| vložky z viskózy ø 60 mm | 8 |
| náhradní pojistky WTA-T 800 mA/250 V | 2 |
| spojka podtlakových kabelů | 2 |

Volitelné vybavení

| | |
|---------------------------|---|
| vakuové elektrody ø 90 mm | ○ |
| vložky z viskózy ø 90 mm | ○ |
| stolek Versa | ○ |