

PhysioGo.Lite LASER

Podívejte se na nový ergonomický přístroj pro biostimulační laserovou terapii společnosti ASTAR – polského výrobce fyzioterapeutického a rehabilitačního vybavení. Na základě 25 let zkušeností v oboru fyzioterapie vytvořila společnost ASTAR přístroj kombinující moderní technologie, ergonomii a pohodlí při používání.

Přístroj PhysioGo.Lite Laser podporuje léčbu onemocnění z klíčových oblastí jeho použití včetně ortopedie, revmatologie, sportovního lékařství a estetického lékařství. Díky relativně nízké hmotnosti a možnosti použití baterií vám přístroj umožňuje pracovat v rehabilitačních centrech i provádět léčbu v domácím prostředí u pacienta. Integrované léčebné programy umožňují snadné a pohodlné provádění léčby pomocí přístroje PhysioGo.Lite Laser.

Přístroj PhysioGo.Lite Laser je vysoce kvalitní přístroj pro biostimulační laserovou terapii, který neinvazivně podporuje regeneraci tkání a zabraňuje rozvoji procesů onemocnění. Důležité je, že biostimulace tkání je zcela bezpečná léčba – nízká energie laseru nezpůsobuje silný tepelný účinek a poškození tkáně. Přístroj je také přizpůsoben pro práci s frekvencemi Nogier a Voll, díky čemuž dobře funguje i při akupunkturální léčbě pomocí laseru.

Integrovaná ilustrovaná terapeutická encyklopedie obsahuje až 175 programů pro různá onemocnění a automatické měření výkonu laserových aplikátorů zajišťuje, že jsou zachovány správné hodnoty záření.




Vlastnosti

- 5" dotykový displej
- Moderní rozhraní
- Statistiky léčby
- Statistiky aplikátorů
- Automatické měření výkonu laseru
- Ilustrovaná terapeutická encyklopedie




Režim programů

Používání přístroje PhysioGo.Lite Laser v režimu programů je pohodlné a jednoduché. Uživatel si může vybrat ze **175 programů připravených pro běžná onemocnění** a také používat předdefinované léčebné postupy, akupunkturální programy Nogier a Voll.

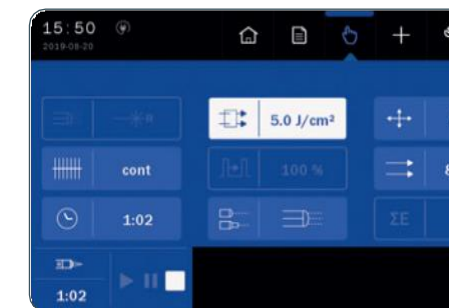


Ruční režim

Přístroj vám umožňuje **vytvářet a ukládat vlastní nastavení léčby**. Lze také kopírovat parametry léčby z terapeutické encyklopedie a přizpůsobit je individuálním potřebám pacienta.

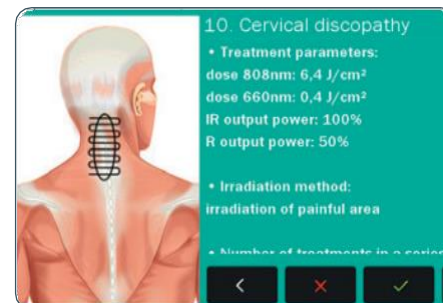

Ilustrovaná terapeutická encyklopedie

Přístroj má integrovanou **terapeutickou encyklopedii**, která obsahuje základní informace o použití biostimulační laserové terapie pro jednotlivá onemocnění, včetně informací o typu aplikátoru, parametrech a doporučené frekvenci léčby.

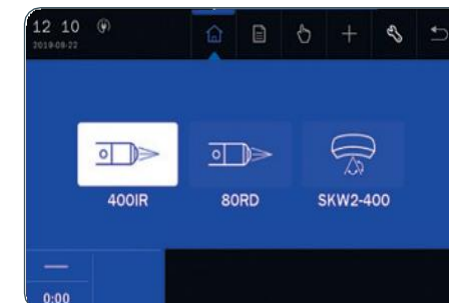

Zásuvky pro tři aplikátory

Přístroj PhysioGo.Lite Laser umožňuje současně připojit tři aplikátory a **při práci s přístrojem mezi nimi libovolně přepínat**. Aplikátory se vybírají ze seznamu dostupného příslušenství.



Mobilita

Přístroj PhysioGo.Lite Laser je lehký a **snadno se přepravuje**. Speciálně navržená pohodlná brašna unese přístroj i jeho příslušenství.



Klastrový laserový aplikátor a bodová sonda červeného světla R 660 nm / 80 mW