

enbio.



Enbio S + Enbio PRO  
Zoznámte sa s autoklávami Enbio.  
Speedmasters.

Designed  in Switzerland

# Ďalší rozmer. Rovnaký výkon.



Typický autokláv



Vrecká na nástroje / hod

50

Vákuum / sušenie



Sterilizátory Enbio sú až 6-krát menšie a 3-krát ľahšie ako typický autokláv triedy B / vákuový autokláv. Pokiaľ však ide o efektivitu práce, držia krok.



Enbio PRO

50



Enbio S

32



# Nová definícia rýchlosti sterilizácie.

Čas sú peniaze. a keď potrebujete mať svoje nástroje pripravené na použitie, potrebujete ich, no, hneď. Spoločnosť Enbio ohýba fyzikálne zákony, aby znížila čakacie doby na minimum.




Typický autokláv







**Trieda B**  
Vákuum  
Vrecká + sušenie

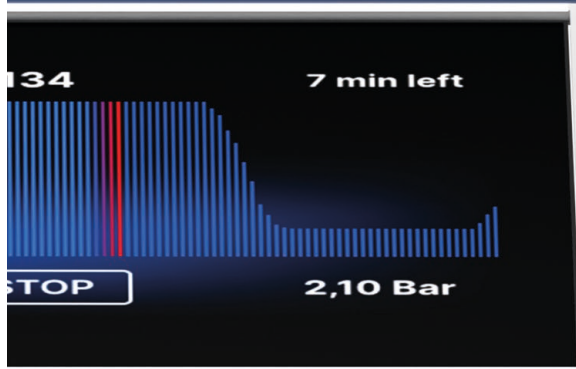

# Enbio S. Speedmaster.

Enbio S je kompaktné, aby sa zmestilo aj do stiesneného priestoru.  
Neuveriteľne krátke časy procesu zachráni váš postup v prípade núdze  
alebo umožnia sterilizáciu nástrojov za pochodu, medzi pacientmi.

Rozbalené  
FAST / 134°C

**7 min**



#### Hmotnosť jednotky

**15 kg**

#### Kapacita

Max. množstvo balíkov (circa) **8**  
Maximálna odporúčaná hmotnosť dávky **0.5 kg**  
Objem procesnej komory **2.7 l**

#### Tlak a teplota

Pracovný tlak **2.1 Bar**  
Max. tlak **2.3 Bar**  
Max. teplota procesu **137°C**



### Trieda B

Vákuové  
vrecká+  
sušenie



### Certifikované pre lekárske účely

Zdravotnícke pomôcky triedy II b  
EN-13060 Smernica 93/42/EHS

Zabalené  
Trieda B / 134 °C

**15 min**

Zabalené  
Trieda B / 121°C

**30 min**



reddot design award  
winner



#### Rozmery

Šírka 25 cm  
Výška 16 cm  
Hĺbka 56 cm

#### Elektrické

Napájanie  
Inštalovaný výkon  
Max. spotreba energie

220-240V 50/60Hz  
2.25 kW  
10 A

#### Rôzne

Stupeň ochrany proti vniknutiu  
Archivácia údajov  
Vodivosť vody\*

IP20  
USB kľúč  
< 15 µS/cm


\* - len demineralizovaná voda

# Enbio PRO. Rýchle a prekvapivo priestranné.

Enbio PRO je ideálnym riešením ako základný pracovný stroj v malej praxi. Super rýchla sterilizácia a priestor pre väčšinu nástrojov vrátane obľúbených kaziet na implantáty.

Rozbalené  
FAST / 134°C

**9 min**

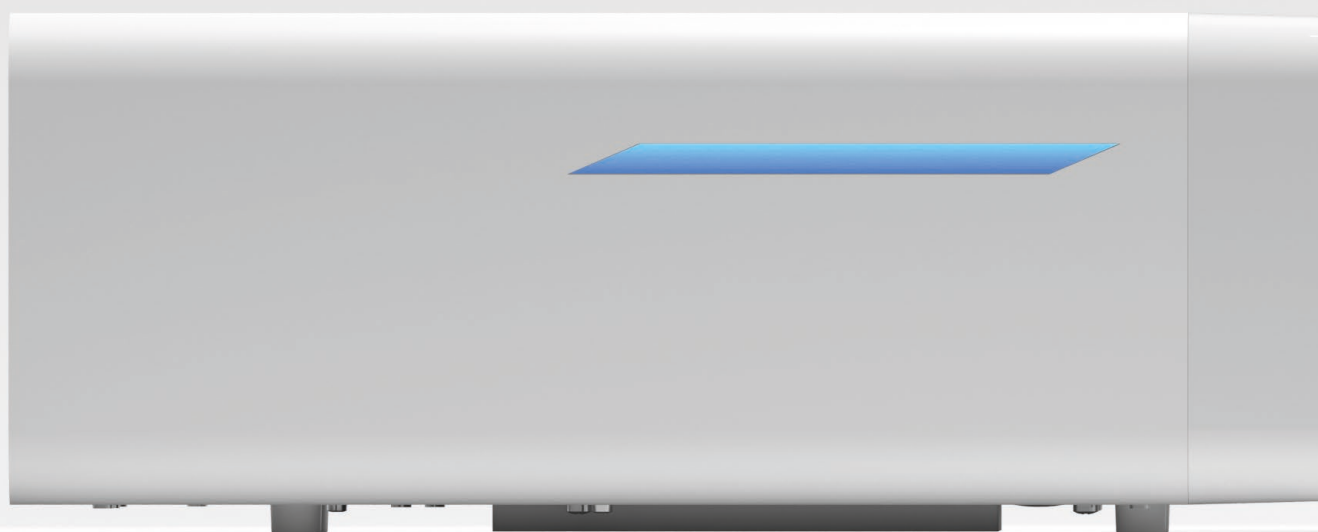

Hmotnosť jednotky

**20 kg**

Kapacita

Max. množstvo balíkov (circa) **16**  
Maximálna odporúčaná hmotnosť dávky **1.0 kg**  
Objem procesnej komory **5.3 l**

Tlak a teplota

Pracovný tlak **2.1 Bar**  
Max. tlak **2.3 Bar**  
Max. teplota procesu **137°C**





### Trieda B

Vákuové  
vrecká+  
sušenie



### Certifikované pre lekárske účely

Zdravotnícke pomôcky triedy II b  
EN-13060 93/42/EHS Smernica

Zabalená  
Trieda B / 134°C

**18 min**

Zabalené  
Trieda B / 121°C

**30 min**

Zabalené / PRION  
Trieda B / 134°C

**43 min**



#### Rozmery

Šírka 25 cm  
Výška 20 cm  
Hĺbka 56 cm

#### Elektrické

Napájanie  
Inštalovaný výkon  
Max. spotreba energie

220-240V 50/60Hz  
2.45 kW  
13 A

#### Rôzne


Ochrana proti vniknutiu  
Archivácia údajov  
Vodivosť vody\*

IP20  
USB kľúč  
< 15 µS/cm

\* - len demineralizovaná voda

# Najmodernejšia technológia

Autoklávy spoločnosti Enbio sú výsledkom dlhoročného rozsiahleho výskumu a predstavujú špičkové zariadenie modernej zdravotníckej technológie.

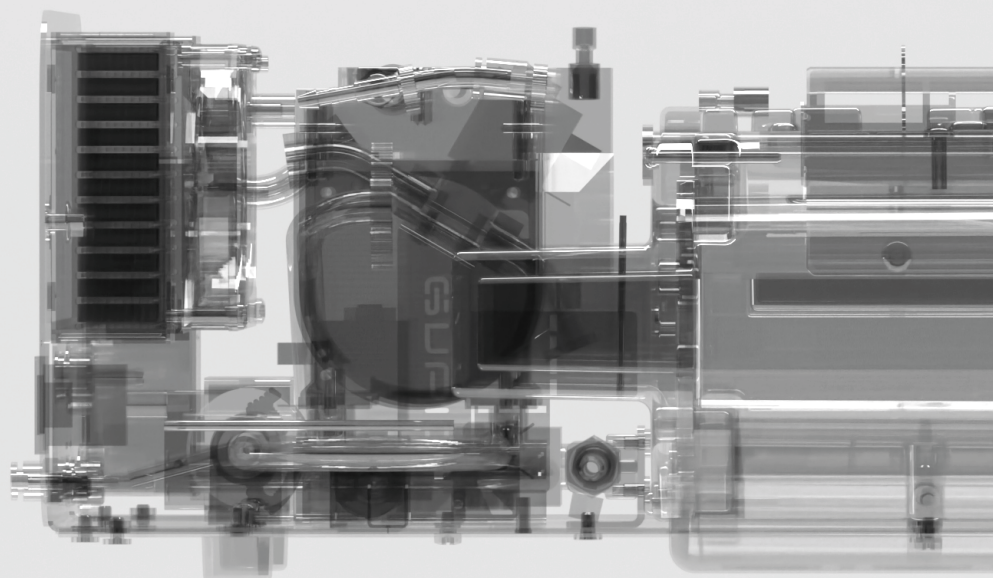


**FDA**  
Cleared

**TUV NORD**

**GXE** CLEANING  
STERILIZATION

**MDSAP**  
Medical Device  
Single Audit Program

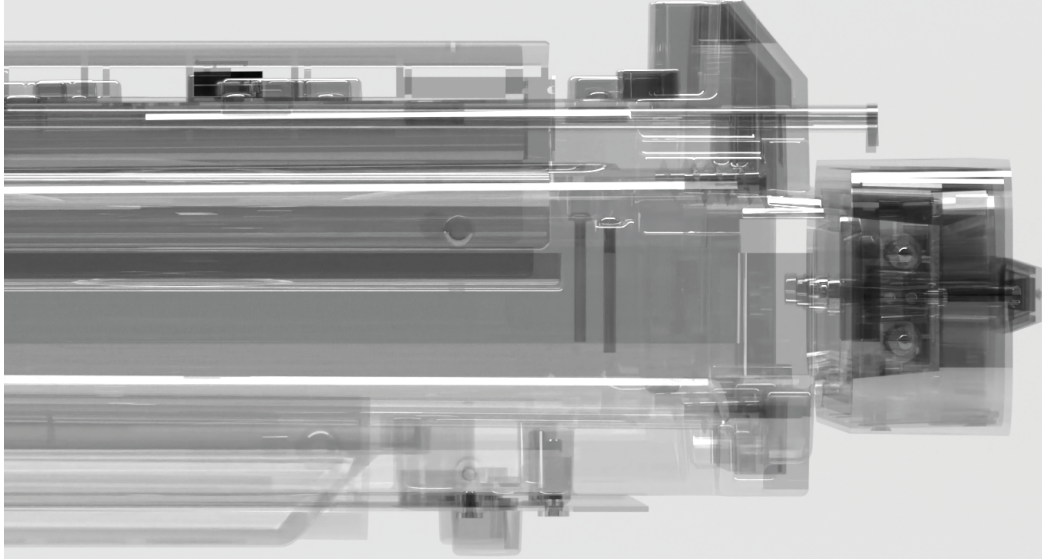



# Používateľská príručka Enbio.






1. Zapojenie
2. Vyberte program
3. Spustite prácu

Inštalácia a prevádzka autoklávov Enbio si nevyžaduje žiadne špeciálne školenie.



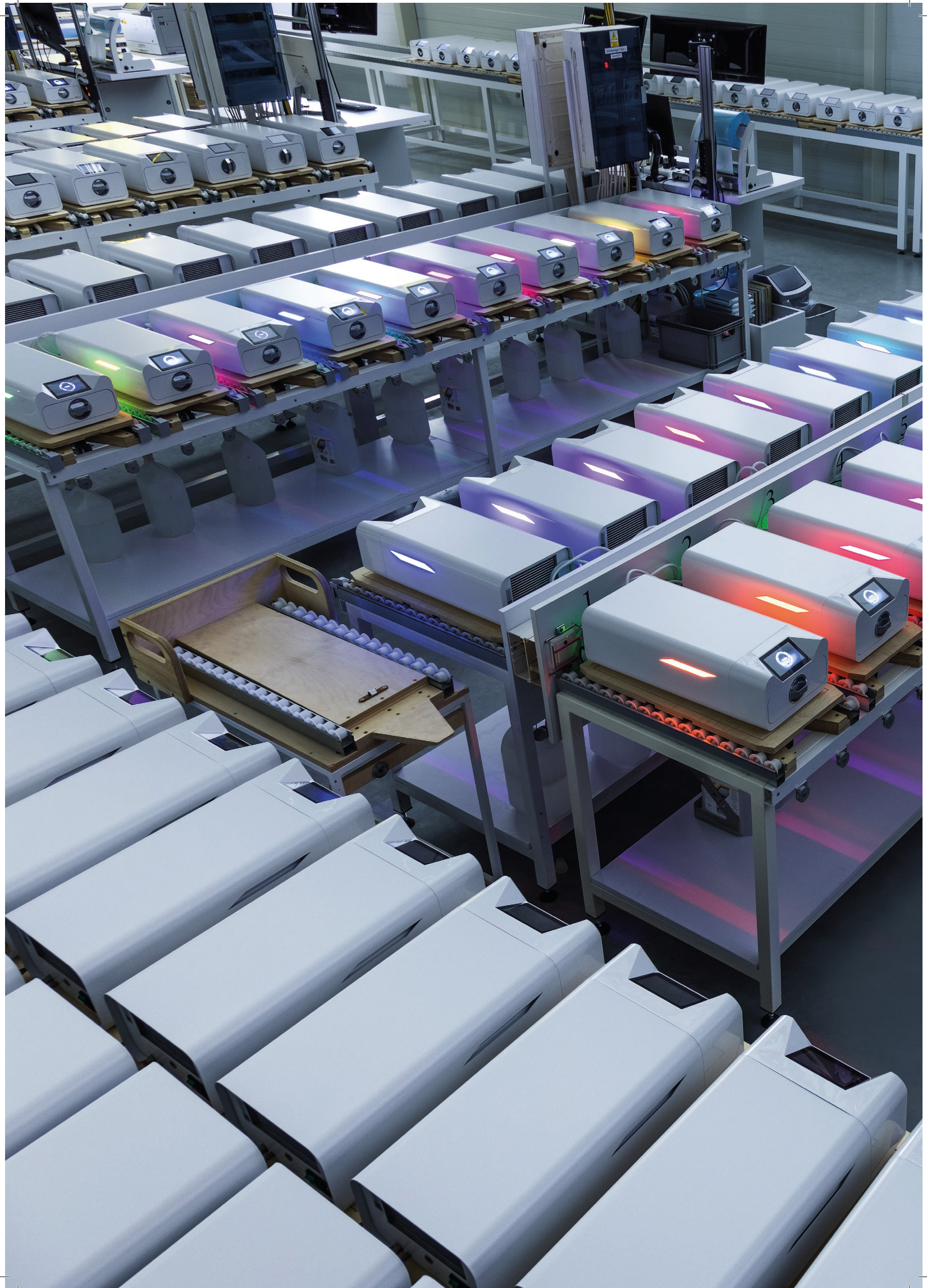



# Celosvetová prítomnosť.

Autoklávy Enbio sa vyrábajú v EÚ a distribuujú sa celosvetovo prostredníctvom logistických centier pokrývajúcich Európu, Severnú Ameriku a Stredný východ.



Rastúca sieť viac ako 200 distribútorov v takmer 50 krajinách pracuje na tom, aby priniesla revolúciu Enbio až k vašim dverám. Naskenujte QR kód a nájdite najbližšieho distribútora.



enbio.



**Enbio Group AG**  
Eichengasse 3, 4702 Oensingen  
Švajčiarsko

**enbio.com**

SK- 2024-07-12