

# PhysioGo 200A




## ULTRAZVUKOVÁ TERAPIE

- voděodolné hlavice
- kontinuální / pulzní emise
- kontrola přilnavosti čela hlavice (měřena efektivní doba léčby)
- kalibrace citlivosti hlavice podle potřeby

Baterie (volitelné příslušenství). Zařízení z rodiny PhysioGo vybavené baterií mají ve svém názvu číslo končící na 1, např. PHG 7011



Prostorná taška PRO  
na přístroj včetně vybavení

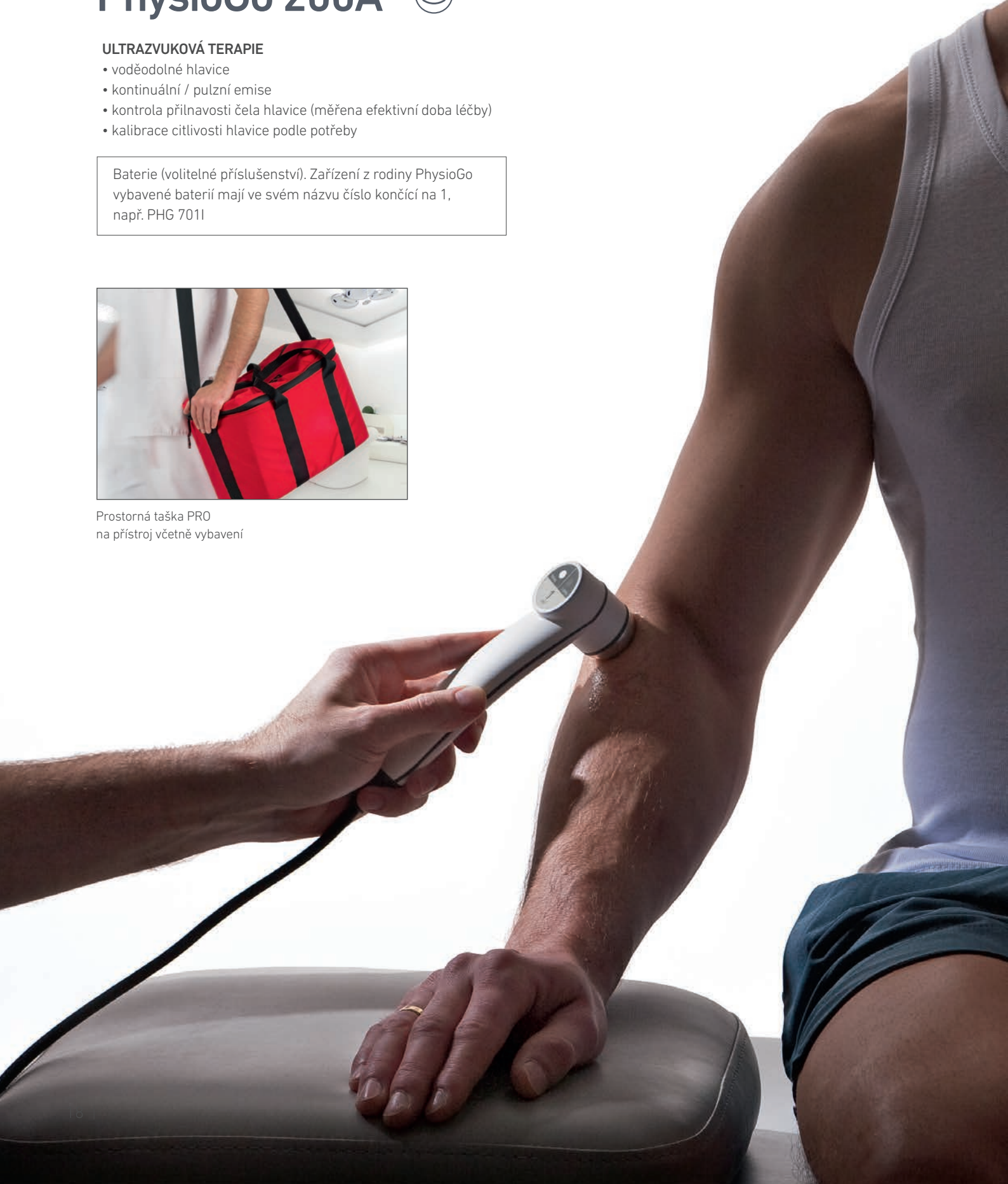



## TECHNICKÉ PARAMETRY

## PhysioGo 200A

### PARAMETRY ULTRAZVUKOVÉ TERAPIE

|                                                               |                                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| pracovní frekvence                                            | 1 MHz i 3,5 MHz                       |
| účinná radiační plocha                                        | 1 cm <sup>2</sup> , 4 cm <sup>2</sup> |
| max. intenzita ultrazvukové vlny - kontinuální / pulzní režim | 2 / 3 W/cm <sup>2</sup>               |
| frekvence v pulzním režimu                                    | 16 Hz, 48 Hz, 100 Hz                  |
| vyplnění v pulzním režimu                                     | 5 – 75%, krok 5%                      |
| časovač ošetření                                              | 30 s – 30 min.                        |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| rozměry přístroje  | 34 x 28 x 11–16 cm |
| hmotnost přístroje | 6 kg               |
| napájení           | 230 V, 50/60 Hz    |
| spotřeba energie   | 90 VA              |

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| síťový kabel                                   | 1 ks |
| hlavice 1/3,5 MHz, 4 cm <sup>2</sup> s držákem | 1 ks |
| ultrazvukový gel 500g                          | 1 ks |
| dotykové pero                                  | 1 ks |
| hadřík na LCD obrazovku                        | 1 ks |
| krycí nástavce s výřezem                       | 2 ks |
| krycí nástavce plné                            | 2 ks |
| náhradní pojistky                              | 2 ks |
| návod k obsluze                                | 1 ks |

## VOLITELNÉ VYBAVENÍ

|                                                |
|------------------------------------------------|
| hlavice 1/3,5 MHz, 1 cm <sup>2</sup> s držákem |
| kabel pro kombinovanou terapii                 |
| taška PRO na přístroj včetně vybavení          |
| stolek Versa/ Versa X                          |
| akumulátor                                     |



Ultrazvukové hlavice  
4 cm<sup>2</sup> a 1 cm<sup>2</sup>

