

PhysioGo 100A

ELEKTROTERAPIE

- práce v režimech CC (stabilizace proudu) nebo CV (stabilizace napětí)
- regulace intenzity v patientském obvodu pro oba kanály současně nebo samostatně
- úplná galvanická izolace mezi kanály v každém režimu
- test elektrod
- léčebné sekvence

PROUDY A METODY

- interferenční (dynamický, izoplanární, jednocanálový (AMF))
- TENS (symetrický, asymetrický, střídavý, Burst)
- TENS pro spastickou obrnu
- Kotzův proud / ruská stimulace
- tonolýza
- diadynamický (MF, DF, CP, CP-ISO, LP)
- pulzní (obdélníkový, trojúhelníkový)
- pulzní Träbertův proud, pulzní Leducův proud, neofaradický proud
- unipolární vlnivý
- galvanický
- mikroproudy


ELEKTRODIAGNOSTIKA


- elektrodiagnostika s grafickým zobrazením I/t křivky
- automatický přepočet reobáze, chronaxie, akomodačního faktoru a kvocientu

Baterie (volitelné příslušenství). Zařízení z rodiny PhysioGo vybavené baterií mají ve svém názvu číslo končící na 1, např. PHG 7011



Dva nezávislé terapeutické kanály

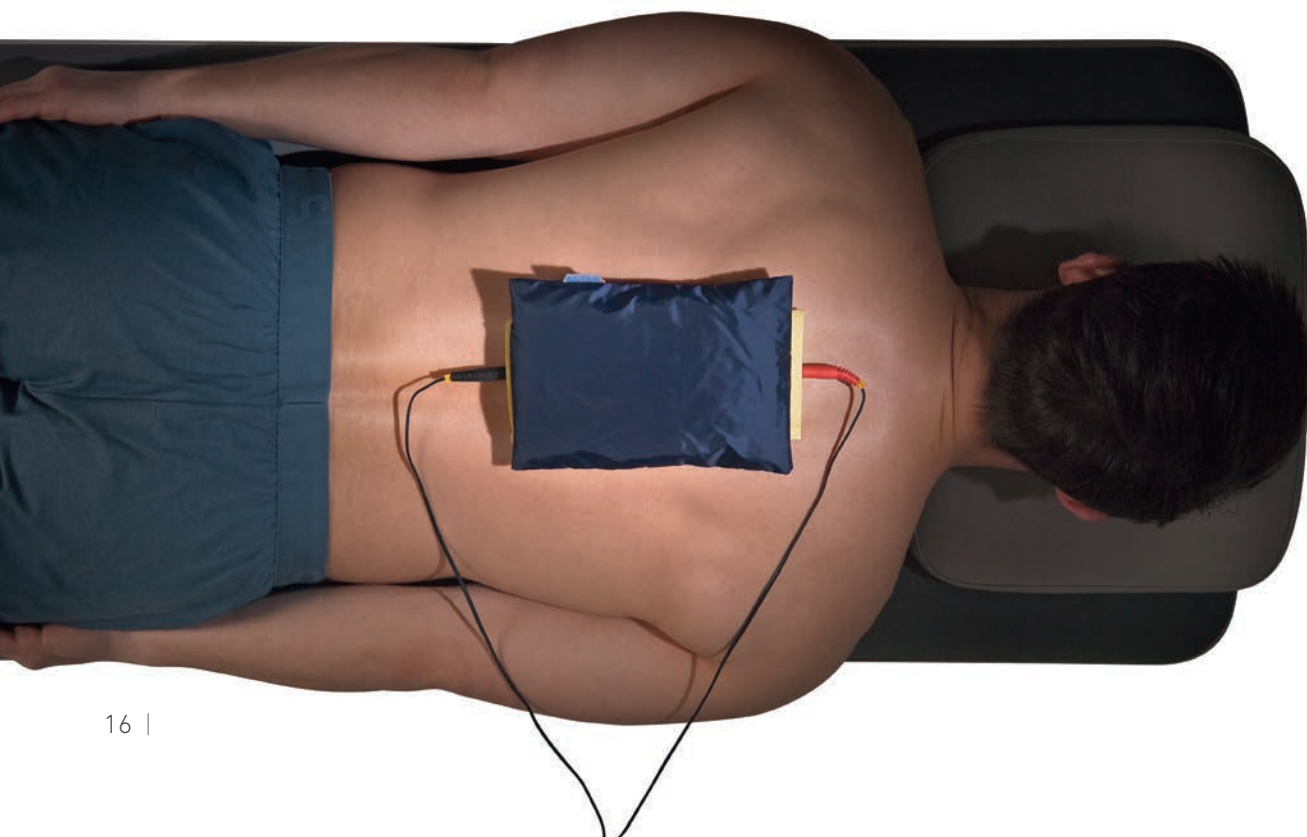

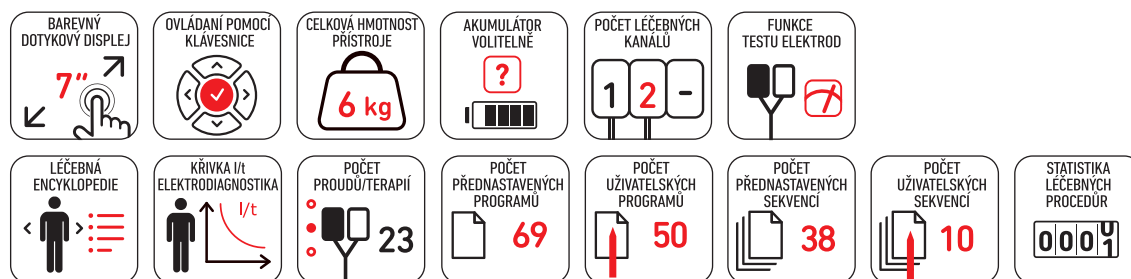

TECHNICKÉ PARAMETRY

PhysioGo 100A

PARAMETRY ELEKTROTHERAPIE

maximální intenzita proudu v pacientském obvodu (režim CC)

galvanický	40 mA
diadynamický, pulzní	60 mA
interferenční, Kotzův proud, unipolární vlnivý	100 mA
TENS a SP-TENS	140 mA
tonolýza	100 mA
mikroproudy	1000 µA
max. amplituda napětí v pacientském obvodu (režim CV)	140 V
časovač ošetření	30 s – 60 min.

rozměry přístroje	34 x 28 x 11-16 cm
hmotnost přístroje	6 kg
napájení	230 V, 50/60 Hz
spotřeba energie	max. 90 VA

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

síťový kabel	1 ks
pacientské kabely	2 ks
elektrody pro elektroterapii 6 x 6 cm	4 ks
elektrody pro elektroterapii 7,5 x 9 cm	2 ks
návlek z viskózy na elektrodu 8 x 8 cm	8 ks
návlek z viskózy na elektrodu 10 x 10 cm	4 ks
pás na suchý zips 40 x 9 cm	2 ks
pás na suchý zips 100 x 9 cm	2 ks
dotykové pero	1 ks
čisticí hadřík pro displej LCD	1 ks
náhradní pojistky	2 ks
krycí nástavce plné	2 ks
návod k obsluze	1 ks
technický popis	1 ks

VOLITELNÉ VYBAVENÍ

samolepící elektrody 5 x 5 cm, 5 x 10 cm
bodové elektrody s adaptérem 6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm
pytlík s pískem 21 x 14 cm, 21 x 28 cm
kabel pro kombinovanou terapii
taška PRO na přístroj včetně vybavení
stolek Versa/ Versa X
akumulátor

